



## Notendahandbók

Beltone HearMax™ app



[Beltone.com](https://Beltone.com)



# Inngangur

Beltone HearMax™ Appið er gert til að auka heyrnarupplifun þína og gera þér kleift að fá meira út úr Beltone heyrnartækjunum þínum.

Nýstárleg hljóðtæknin og hönnunin spannar heila vörulínu heyrnartækja sem gera heyrnina að mun ánægjulegri upplifun. Heyrnartækin er aðeins hægt að nálgast í gegnum heyrnarfræðinga.

Beltone HearMax™ forritið gerir þér kleift að nýta þér heyrnartækin enn betur en áður, með því að bjóða upp á nýjar leiðir við stjórн mögnunar, sérsviðna virkni og heyrnarstuðning.

BeltoneAppið er afbrigði af GAN appinu.

Hægt er að nálgast útprentaða útgáfu af notendahandbók forritsins með því að hafa samband við notendaþjónustu eða einfaldlega að prenta þessa notendahandbók út.

Fyrir frekari upplýsingar og hjálp fyrir öpp, vinsamlegast hafðu samband við heyrnarfræðinginn þinn eða farðu á vefsíðu okkar [beltone.com](http://beltone.com).



## Fyrirhuguð notkun

Beltone HearMax™ Appinu er ætlað að vera fjarstýring fyrir þráðlaus heyrnartæki framleidd af GN óháð vörumerki.

Beltone HearMax™ Appinu er ætlað að vera fjarstýring fyrir þráðlaus fylgihluti framleidd af GN óháð vörumerki.

Beltone HearMax™ Appinu er ætlað að vera hjálpartæki fyrir þráðlaus heyrnartæki framleidd af GN óháð vörumerki.

Þegar forritið er notað sem fjarstýring getur það aðlagað heyrnartækið í samræmi við þær stillingar sem heyrnarfræðingurinn valdi.

Þegar forritið er notað sem aðstoðarverkfæri veitir það notandanum tengingu við heyrnarfræðing, sem getur aðlagað stillingar heyrnartækisins gegnum fjaraðgang.

## Tákn



**VIÐVÖRUN:** Táknar aðstæður sem gætu leitt til alvarlegra meiðsla.



Framleiðsludagsetning.



**VARÚÐ:** Gefur til kynna aðstæður sem gætu leitt til vægra og meðalalvarlegra meiðsla.



Lækningatæki.



Skoðaðu rafrænar notkunarleiðbeiningar.



Einkvæmt auðkenni tækis.



Lögaðili sem framleiðir tækið.

# Að finna og setja upp appið



Fáðu aðgang að forritum fyrir iPhone, iPad og iPod touch með niðurhali í App Store með því að fylgja þessum skrefum:

1. Farðu inn í App Store með því að banka á App Store táknið á iPhone, iPad eða iPod touch
2. Í App Store, leitaðu að 'Beltone' og nafni forritsins
3. Ef þú notar iPad skaltu breyta leitarskilyrðunum efst í vinstra horninu í „aðeins iPhone“
4. Þegar þú hefur fundið forritið skaltu smella á 'Fá'
5. Pikkaðu svo á 'install'
6. Sláðu inn gilt Apple auðkenni og lykilorð
7. Eftir að þú hefur slegið inn lykilorðið geturðu fundið forritið á skjá tækisins - bankaðu á til að opna forritið



Fáðu aðgang að forritum fyrir Android tæki með niðurhali í Google Play með því að fylgja þessum skrefum:

1. Sláðu inn Google Play með því að banka á Play Store táknið á Android símanum þínum
2. Í Google Play, leitaðu að 'Beltone' og nafni appsins
3. Þegar þú hefur fundið forritið skaltu smella á 'Setja upp'
4. Eftir að þú hefur slegið inn lykilorðið þitt mun appið hlaða niður og setja upp
5. Eftir að uppsetningunni er lokið pikkarðu á 'Opna' til að byrja að nota forritið



## Beltone HearMax™ forritið

Beltone HearMax™ forritið er ótrúlega notendavænt, allt sem þarf er ein snerting. Stjórnaðu og sérsníddu stillingar heyrnartækisins beint í fartækinu þínu svo þú getir aðlagað heyrnarupplifun þína að hljóðumhverfinu hverju sinni. Þú getur látið heyrnarfræðinginn uppfæra kerfi heyrnartækjanna og fengið þráðlausar uppfærslur í heyrnartækin án þess að þurfa að fara á læknastofuna. Beltone HearMax™ Forritið mun leiðbeina þér um allt sem þú getur gert og hvernig á að gera það.

Beltone HearMax™ forritið er í boði á App Store og Google Play.

## Upplýsingar um samhæft tæki

Forritið er samhæft við þráðlaus heyrnartæki og fylgihluti frá Beltone A/S.

Til að fá heildarlista yfir samhæfileg tæki, vinsamlegast skoðið [beltone.com](http://beltone.com).


Gakktu úr skugga um að heyrnartækin séu uppfærð í nýjustu vélbúnaðarútgáfuna í gegnum appið. Heyrnarsérfræðingurinn þinn getur uppfært vélbúnaðar heyrnartækjanna fyrir þig.

# Beltone HearMax™ virkni appsins

1. Notaðu efsta fletthlutann, fellilistann eða kortaraufina til að velja heyrnartæki, straumspilunarkerfi eða úr eftirlæti þínu. Ýttu á fellilistann til að breyta kerfum og eftirlæti.
2. Notaðu flýtihnappana fyrir ítarlegar hljóðstillingar með einni snertingu.
3. Stilltu hljóðstyrkinn eða slökktu á hljóði.
4. Opnaðu Sound Enhancer til að stilla diskant/miðtíðni/bassa, hávaðadeyfingu, viðtakanda í tali eða vindgnauðsdeyfingu\*. Opnaðu einnig eyrnasuðsstjórnanndann til að stilla tónhæð og hljóðafbrigði úr eyrnasuðshljóðgjafanum, eða til að velja náttúruhljóðið þitt\*\*.
5. Yfirlitsvalmynd.
6. Valmyndin „My“:  
Hér getur þú kynnt þér hvað forritið getur gert og haft samband við heyrnarfræðinginn þinn\* til að biðja um aðstoð og fá sendar uppfærslur á stillingum heyrnartækisins.
7. Valmyndin „More“:  
Hér getur þú valið stillingar forritsins og fundið viðbótarupplýsingar um forritið.

\*Framboð eiginleika veltur á gerð heyrnartækisins og uppsetningu heyrnarfræðingsins.

\*\*Í boði ef eyrnasuðshljóðgjafinn hefur verið virkjaður af heyrnarfræðingnum þínum.

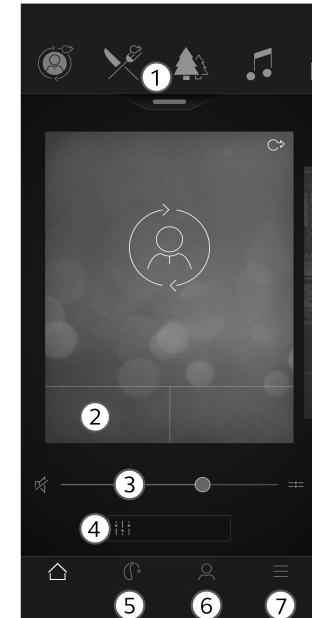

# Viðvaranir og varúðarráðstafanir

## Notkun með forritum í fartækjum

Ekki ætti að slökkva á tilkynningum um appuppfærslur og mælt er með því að notandinn setji upp allar uppfærslur á appi og stýrikerfi til að tryggja hámarksvörn gegn veikleikum.

Aðeins má nota appið með Beltone tækjum sem það er ætlað fyrir. Beltone tekur enga ábyrgð ef appið er notað með öðrum tækjum eða ef forrit frá þriðja aðila eru notuð til að stjórna Beltone tækjunum.

Notaðu aðeins fjarstillingarpakka sem þú býst við að fá á heyrnartækin þín.

Beltone styður ekki farsíma með rótum.

## Varnaðarorð og varúðarreglur

Ef nota á forritið með heyrnartækjum skal lesa notendahandbók heyrnartækjanna. Notendahandbókin fylgdi með í pakkanum með heyrnartækjunum. Ef þig vantar nýtt eintak, vinsamlegast hafðu samband við heyrnarfræðinginn þinn eða farðu á heimasíðu okkar.

Vertu meðvituð um upplýsingar sem eru merktar með viðvörunartáknum.



**VARÚÐ:** Notaðu alltaf nýjustu tiltæku hugbúnaðaruppfærsluna fyrir tækið.

Ef þessum varúðarráðstöfunum er ekki fylgt getur það haft áhrif á upplýsingaöryggi heyrnartækisins og hugsanlega valdið heyrnartapi eða eyrnuðu.

# Höfundarréttur

© 2023 GN Hearing Care Corporation. Allur réttur áskilinn. Beltone er vörumerki GN Hearing Care Corporation. Apple, Apple-vörumerkið, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch eru vörumerki Apple Inc., skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum. App Store er þjónustumerki Apple Inc., skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum. Android, Google Play og Google Play lógóið eru vörumerki Google LLC.



Framleiðandi samkvæmt ESB-  
reglugerð 2017/745 um  
lækningabúnað:

 Beltone A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Danmörk  
[beltone.com](http://beltone.com)

**Staðbundnir tengiliðir:**

**Ísland**  
Heyrnarstöðin  
Kringlunni 4-12  
103 Reykjavík  
Sími 568 7777  
[heyra@heyra.is](mailto:heyra@heyra.is)  
[www.heyrnarstodin.is](http://www.heyrnarstodin.is)

 Tilkynna skal um hvert alvarlegt atvik sem hefur átt sér stað í tengslum við tækið löggiltum framleiðanda Beltone A/S og lögbærur yfirvaldi aðildarríkis  
0297 ESB þar sem notandinn og/eða sjúklingurinn hefur staðfestu.