

Εγχειρίδιο χρήστη

BeMore Εφαρμογή

Εισαγωγή

Η εφαρμογή BeMore έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βελτιώσει την ακουστική εμπειρία σας και να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε πλήρως τα ακουστικά σας βοηθήματα BeMore.

Η πρωτοποριακή ηχητική τεχνολογία και ο σχεδιασμός περιέχονται σε μια πλήρη σειρά ακουστικών βοηθημάτων που κάνουν την ακοή μια πιο ευχάριστη εμπειρία. Τα ακουστικά βοηθήματα διατίθενται αποκλειστικά από ακοολόγους και ειδικούς σε θέματα ακουστικής υγείας.

Η εφαρμογή BeMore σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε πλήρως τα ακουστικά σας βοηθήματα, παρέχοντάς σας νέους τρόπους ελέγχου, εξατομίκευσης και ανακούφισης.

Η εφαρμογή BeMore είναι μια παραλλαγή της εφαρμογής GAN.

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια για τις εφαρμογές, επισκεφθείτε τον ιστότοπο που δίνεται στην πίσω σελίδα.

Εάν θέλετε μια έντυπη έκδοση του εγχειριδίου χρήστη της εφαρμογής, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή απλώς εκτυπώστε το παρόν εγχειρίδιο.

Προβλεπόμενη χρήση

Η εφαρμογή BeMore προορίζεται ως ένα εργαλείο απομακρυσμένου ελέγχου και υποβοήθησης για τα ασύρματα ακουστικά βοηθήματα BeMore. Όταν χρησιμοποιείται ως εργαλείο απομακρυσμένου ελέγχου, η εφαρμογή μπορεί να προσαρμόζει το ακουστικό βοήθημα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που επιλέγονται από τον ειδικό σε θέματα ακουστικής υγείας. Όταν χρησιμοποιείται ως εργαλείο υποβοήθησης, η εφαρμογή παρέχει στον χρήστη μια σύνδεση με τον ειδικό σε θέματα ακουστικής υγείας, ο οποίος μπορεί να προσαρμόζει εξ αποστάσεως τις ρυθμίσεις του ακουστικού βοηθήματος.

Σύμβολα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επισημαίνει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Δηλώνει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρής και μέτριας σοβαρότητας τραυματισμούς.



Συμβουλευτείτε τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης.



Νόμιμος κατασκευαστής.



Ημερομηνία κατασκευής.



Ιατροτεχνολογικό προϊόν.



Αποκλειστική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Εύρεση και εγκατάσταση της εφαρμογής



Αποκτήστε πρόσβαση στις εφαρμογές για iPhone, iPad και iPod touch μέσω λήψης από το App Store ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Εισέλθετε στο App Store πατώντας το εικονίδιο App Store σε ένα iPhone, iPad ή iPod touch
2. Μέσα στο App Store, πραγματοποιήστε αναζήτηση για τον όρο BeMore και το όνομα της εφαρμογής
3. Εάν χρησιμοποιείτε iPad, αλλάξτε τα κριτήρια αναζήτησης στην επάνω αριστερή γωνία σε "iPhone only" (iPhone μόνο)
4. Αφού βρείτε την εφαρμογή, πατήστε "Get" (Λήψη)
5. Έπειτα, πατήστε "Install" (Εγκατάσταση)
6. Εισαγάγετε ένα έγκυρο αναγνωριστικό Apple ID και τον κωδικό πρόσβασης
7. Μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή στην οθόνη της συσκευής σας - πατήστε για να ανοίξετε την εφαρμογή



Αποκτήστε πρόσβαση στις εφαρμογές για συσκευές Android μέσω λήψης από το Google Play ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Εισέλθετε στο Google Play πατώντας το εικονίδιο Play Store στο τηλέφωνο Android
2. Στο Google Play, πραγματοποιήστε αναζήτηση για τον όρο "GN Hearing" και το όνομα της εφαρμογής
3. Αφού βρείτε την εφαρμογή, πατήστε "Install" (Εγκατάσταση)
4. Μετά από την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, θα γίνει λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής
5. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε "Open" (Άνοιγμα) για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή

Εφαρμογή BeMore

Η εφαρμογή BeMore προσφέρει απaráμιλλη φιλικότητα προς τον χρήστη με ένα μόνο πάτημα. Ελέγξτε και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του ακουστικού σας βοηθήματος απευθείας από την κινητή συσκευή σας, ώστε να μπορείτε να εξατομικεύσετε την ακουστική σας εμπειρία ανάλογα με το ακουστικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε. Μπορείτε ακόμη να λαμβάνετε προγράμματα των ακουστικών σας βοηθημάτων, ενημερωμένα από τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας και να λαμβάνετε ενημερώσεις των ακουστικών βοηθημάτων εξ αποστάσεως, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε την κλινική. Η εφαρμογή BeMore θα σας καθοδηγεί για όλα όσα μπορείτε να κάνετε και για το πώς θα τα κάνετε.

Η εφαρμογή BeMore είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Google Play.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, χρειάζεστε τις εξής συσκευές

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για συγκεκριμένες πληροφορίες συμβατότητας και μια ενημερωμένη λίστα με τις συμβατές κινητές συσκευές: go.gn.com/app-support

Ακουστικά βοηθήματα*:

- Το BeMore είναι συμβατό με ακουστικά βοηθήματα που κατασκευάζονται από την GN Hearing.

Κινητές συσκευές:

- iPhone, iPad και iPod touch. Η εφαρμογή BeMore είναι επίσης συμβατή με το Apple Watch.
- Υποστηριζόμενη συσκευή Android.


*Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βοηθήματα έχουν ενημερωθεί στην τελευταία έκδοση υλικολογισμικού μέσω της εφαρμογής. Ο ειδικός σας σε θέματα ακουστικής υγείας μπορεί να ενημερώσει για εσάς το υλικολογισμικό των ακουστικών σας βοηθημάτων.

Λειτουργικότητα της εφαρμογής BeMore

1. Χρησιμοποιήστε την επάνω γραμμή κύλισης, την αναπτυσσόμενη λίστα ή τη διάταξη σάρωσης κάρτας για να επιλέξετε το δικό σας ακουστικό βοήθημα ή το πρόγραμμα ροής ήχου ή τα Αγαπημένα σας. Πατήστε την αναπτυσσόμενη λίστα για να επεξεργαστείτε προγράμματα και Αγαπημένα.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά γρήγορης πρόσβασης για σύνθετες προσαρμογές ήχου με ένα πάτημα.
3. Προσαρμόστε την ένταση ήχου ή εφαρμόστε σίγαση.
4. Μεταβείτε στην Ενίσχυση ήχου για να προσαρμόσετε τα πρίμα/μεσαία/μπάσα, τη μείωση θορύβου, την εστίαση στην ομιλία ή τη μείωση του θορύβου από τον αέρα*. Μεταβείτε επίσης στο πρόγραμμα διαχείρισης εμβοών για να προσαρμόσετε το βήμα και τη διακύμανση του ήχου από το Tinnitus Sound Generator ή επιλέξτε το δικό σας Nature Sound**.
5. Μενού πλοήγησης.
6. Το μενού «Το δικό μου»:
Εδώ μπορείτε να μάθετε τι μπορεί να κάνει η εφαρμογή και να επικοινωνήσετε με τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας* για να ζητήσετε βοήθεια και να λαμβάνετε ενημερώσεις στις ρυθμίσεις των ακουστικών σας βοηθημάτων.
7. Το μενού «Περισσότερα»:
Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής και να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για την εφαρμογή σας.

*Η διαθεσιμότητα λειτουργιών εξαρτάται από το μοντέλο του ακουστικού βοηθήματος και την τοποθέτηση από τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας.

**Διατίθεται εάν το Tinnitus Sound Generator έχει ενεργοποιηθεί από τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας.

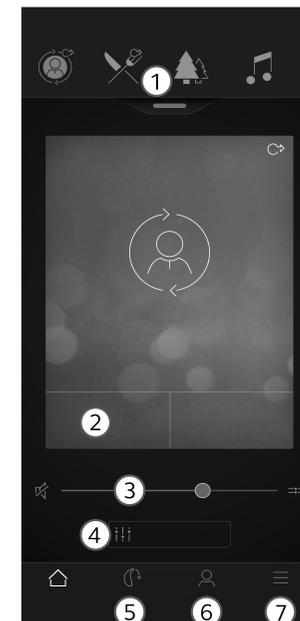

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Χρήση με εφαρμογές για κινητές συσκευές

Οι ειδοποιήσεις για ενημερώσεις των εφαρμογών δεν θα πρέπει να απενεργοποιηθούν. Συστήνεται ο χρήστης να εγκαθιστά στην εφαρμογή και το λειτουργικό σύστημα όλες τις ενημερώσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή προστασία από τρωτότητες.

Η εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με συσκευές BeMore για τις οποίες προορίζεται. Η BeMore δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης της εφαρμογής με άλλες συσκευές ή σε περίπτωση χρήσης εφαρμογών τρίτων για τον έλεγχο των συσκευών BeMore.

Εφαρμόζετε μόνο τα πακέτα απομακρυσμένου συντονισμού που αναμένετε να λάβετε στα ακουστικά σας βοηθήματα.

Η BeMore δεν υποστηρίζει κινητά τηλέφωνα με βάση.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Φροντίστε να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη του ακουστικού βοηθήματος προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μαζί με το ακουστικό βοήθημα. Το εγχειρίδιο χρήστη του ακουστικού βοηθήματος συμπεριλαμβανόταν στο πακέτο του ακουστικού βοηθήματος. Εάν χρειάζεστε νέο αντίτυπο, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας (βλ. οπισθόφυλλο για τη διεύθυνση ιστότοπου).

Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες που φέρουν το σύμβολο προειδοποίησης.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιείτε πάντα την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού για το ακουστικό σας βοήθημα.

Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις προφυλάξεις, μπορεί να διακινδυνεύσετε την προστασία των δεδομένων του ακουστικού βοηθήματος και να προκληθεί ενδεχομένως απώλεια ακοής ή εμβοές.

Copyright

© 2023 GN Hearing A/S. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Η ονομασία Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple, οι ονομασίες iPhone, iPad, iPod touch και Apple Watch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η ονομασία App Store αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc., κατατεθέν στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Οι ονομασίες Android, Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Κατασκευαστής σύμφωνα με τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2017/745 περί
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:



GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Δανία
Τηλ. +45 4575 1111

 Κάθε σοβαρό περιστατικό που προκύπτει σε σχέση με το προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στον νόμιμο κατασκευαστή GN Hearing A/S και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο κατοικεί ο χρήστης ή/και ασθενής.