

Interton GN



Panduan pengguna

Interton Sound Aplikasi

Pengenalan


Aplikasi Interton Sound dibuat untuk meningkatkan pengalaman pendengaran anda dan membolehkan anda mendapat lebih banyak manfaat daripada Interton alat bantuan pendengaran anda.

Teknologi dan rekaan bunyi yang inovatif datang dalam barisan penuh alat bantuan pendengaran yang menjadikan pengalaman mendengar lebih menyenangkan. Alat bantuan pendengaran boleh didapati secara eksklusif melalui ahli audiologi dan pakar penjagaan pendengaran.

Aplikasi Interton Sound membolehkan anda memanfaatkan alat bantuan pendengaran anda dengan menyediakan cara baharu untuk mendapatkan kawalan, pemperibadian dan kelegaan.

Untuk maklumat lanjut dan bantuan untuk aplikasi, sila layari laman web yang ditunjukkan di halaman belakang.

Jika anda ingin versi bercetak bagi panduan pengguna aplikasi, sila hubungi sokongan pengguna atau terus cetak panduan pengguna ini.

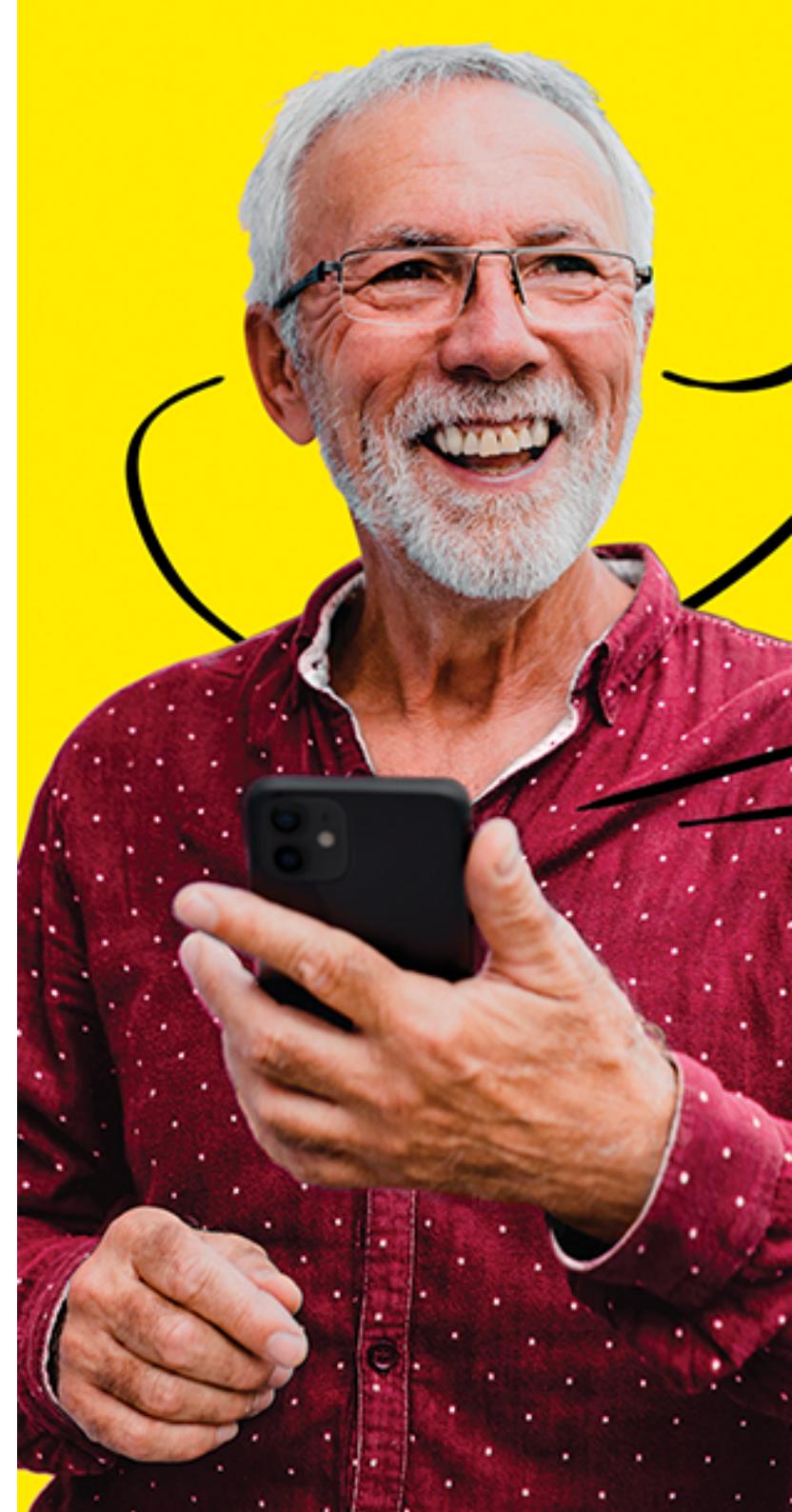

Penggunaan yang dimaksudkan

Aplikasi Interton Sound bertujuan untuk menjadi alat kawalan jauh dan alat bantuan untuk bantuan pendengaran wireless Interton kami. Apabila digunakan sebagai alat kawalan jauh, aplikasi boleh melaraskan alat bantuan pendengaran mengikut tetapan yang dipilih oleh pihak profesional penjagaan pendengaran. Apabila digunakan sebagai alat bantuan, aplikasi tersebut memberikan pengguna sambungan kepada pihak profesional penjagaan pendengaran, yang boleh melaraskan tetapan alat pendengaran dari jarak jauh.

Simbol



AMARAN: Menunjukkan situasi yang boleh membawa kepada kecederaan serius.



AWAS: Menunjukkan situasi yang boleh membawa kepada kecederaan ringan dan sederhana.



Rujuk arahan elektronik untuk pengunaannya.



Pengilang yang sah.



Tarikh pembuatan.



Peranti Perubatan.

Mencari dan memasang aplikasi



Akses aplikasi untuk iPhone, iPad dan iPod touch melalui muat turun di App Store dengan mengikuti langkah-langkah ini:

1. Masuk ke App Store dengan mengetik ikon App Store pada iPhone, iPad atau iPod touch
2. Pada App Store, cari 'Interton' dan nama aplikasi
3. Jika menggunakan iPad, tukar kriteria carian dalam sudut atas kiri kepada 'iPhone only'
4. Selepas menemui aplikasi, ketik 'Get'
5. Kemudian, ketik 'Install'
6. Masukkan Apple ID dan kata laluan yang sah
7. Selepas memasukkan kata laluan, anda boleh mencari aplikasi pada skrin peranti anda - ketik untuk membuka aplikasi



Akses aplikasi untuk peranti Android melalui muat turun di Google Play dengan mengikuti langkah-langkah ini:

1. Masuk ke Google Play dengan mengetik ikon Play Store pada telefon Android anda
2. Pada Google Play, cari 'Interton' dan nama aplikasi
3. Selepas menemui aplikasi, ketik 'Install'
4. Selepas memasukkan kata laluan anda, aplikasi akan memuat turun dan memasang
5. Selepas pemasangan selesai, ketik 'Open' untuk mula menggunakan aplikasi



Interton Sound aplikasi

Aplikasi Interton Sound menawarkan kemesraan pengguna yang tidak pernah berlaku sebelum ini hanya dengan satu ketikan jari. Kawal dan sesuaikan tetapan alat bantuan pendengaran anda terus daripada peranti mudah alih anda, supaya anda boleh memperbaikan pengalaman pendengaran anda untuk memadankan persekitaran bunyi anda. Anda juga boleh mendapatkan program alat bantuan pendengaran yang dikemas kini oleh pakar penjagaan pendengaran anda dan menerima kemas kini alat bantuan pendengaran dari jauh tanpa pergi ke klinik. Aplikasi Interton Sound ini akan membimbing anda tentang semua perkara yang boleh anda lakukan dan cara untuk melakukannya.

Aplikasi Interton Sound boleh didapati di App Store dan Google Play.

Untuk menggunakan aplikasi, anda memerlukan peranti berikut

Sila layari laman web kami untuk mendapatkan maklumat keserasian khusus dan senarai terkini peranti mudah alih yang serasi: interton.com/compatibility

Alat bantuan pendengaran*:

- Interton Move dan Interton Ready.


Peranti mudah alih:

- iPhone, iPad dan iPod touch. Aplikasi Interton Sound juga serasi dengan Apple Watch.
- Peranti Android yang disokong.

*Pastikan alat bantuan pendengaran dikemas kini kepada versi perisian tegar terkini melalui aplikasi. Pakar penjagaan pendengaran anda boleh mengemas kini perisian tegar alat bantuan pendengaran untuk anda.

Interton Sound fungsi aplikasi

1. Gunakan karusel atas, lungsur turun atau leret kad untuk memilih alat bantuan pendengaran atau program penstrim anda, atau Kegemaran anda. Ketik lungsur turun untuk mengedit program dan Kegemaran.
2. Gunakan Butang Pantas untuk satu ketik, pelarasan bunyi lanjutan.
3. Laraskan kelantangan atau bisukan.
4. Akses Peningkat Bunyi untuk melaraskan trebel/mid/bes, pengurangan bunyi, fokus ucapan atau pengurangan bunyi angin*. Selain itu, akses Pengurus Tinitus untuk melaraskan nada dan variasi bunyi daripada Penjana Bunyi Tinitus, atau untuk memilih Bunyi Semula Jadi anda**.
5. Menu navigasi.
6. Menu “My”:
Di sini, anda boleh ketahui apa yang boleh aplikasi lakukan dan hubungi pakar penjagaan pendengaran anda* untuk meminta bantuan dan menerima kemas kini kepada tetapan alat bantuan pendengaran.
7. Menu “More” :
Di sini anda boleh melaraskan tetapan aplikasi dan mencari maklumat tambahan pada aplikasi anda.

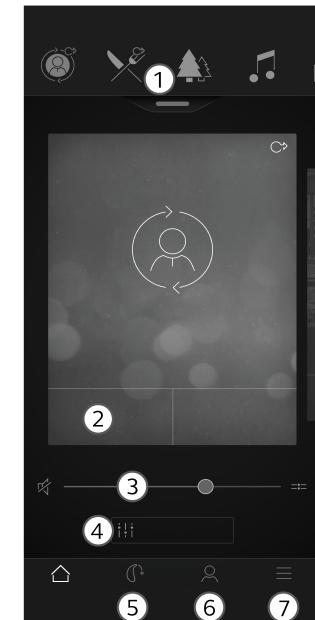

*Ketersediaan ciri bergantung pada model alat bantuan pendengaran dan pemasangan oleh pakar penjagaan pendengaran anda.

**Tersedia jika Penjana Bunyi Tinitus telah didayakan oleh pakar penjagaan pendengaran anda.

Amaran dan langkah berjaga-jaga

Penggunaan dengan aplikasi peranti mudah alih

Pemberitahuan kemas kini aplikasi tidak boleh dinyahdayakan dan pengguna disyorkan supaya memasang semua kemas kini kepada aplikasi dan sistem operasi untuk memastikan perlindungan tertinggi terhadap kelemahan.

Aplikasi hanya boleh digunakan dengan peranti Interton yang dimaksudkan. Interton tidak bertanggungjawab jika aplikasi itu digunakan dengan peranti lain atau jika aplikasi pihak ketiga digunakan untuk mengawal peranti Interton tersebut.

Gunakan hanya pakej pelarasan halus dan jauh yang anda harapkan untuk menerima instrumen pendengaran anda.

Interton tidak menyokong telefon mudah alih rooted.

Amaran dan peringatan

Sekiranya menggunakan aplikasi dengan alat bantuan pendengaran, sila baca panduan pengguna alat bantuan pendengaran. Panduan pengguna alat bantuan pendengaran termasuk dalam pakej alat bantuan pendengaran. Sekiranya anda memerlukan satu salinan baharu, sila rujuk Pakar Penjagaan Pendengaran anda atau layari laman web kami (lihat halaman belakang untuk alamat laman web).

Berhati-hati dengan maklumat yang ditandakan dengan simbol amaran.



AWAS: Sentiasa gunakan kemas kini perisian terkini yang tersedia untuk alat bantuan pendengaran anda.

Kegagalan mematuhi amaran ini boleh menjelaskan keselamatan maklumat alat bantuan pendengaran anda dan berpotensi menyebabkan kehilangan pendengaran atau tinnitus.

Hak cipta

© 2022 GN Hearing A/S. Hak cipta terpelihara. Interton ialah tanda dagangan GN Hearing A/S. Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch dan Apple Watch ialah tanda dagangan Apple Inc., didaftarkan di A.S. dan negara-negara lain. App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc., didaftarkan di A.S. dan negara-negara lain. Android, Google Play dan logo Google Play ialah tanda dagangan Google LLC.

Interton GN

Pengeluar mengikut Peraturan Peranti
Perubatan EU 2017/745:

 Interton A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark
interton.com

 0297 Sebarang insiden serius yang telah berlaku berkaitan dengan peranti hendaklah dilaporkan kepada pengilang Interton A/S yang Sah dan pihak berkuasa berwibawa Negara Anggota EU tempat pengguna dan/atau pesakit itu ditubuhkan.